

per rassodare viso e collo,
sollevare le guance
ed attenuare le rughe,
ridurre il doppio mento, togliere le borse agli occhi.



TUA VISO è un apparecchio elettronico per la ginnastica del viso.

L'esercizio dei muscoli facciali, direttamente ancorati alla pelle, li rende più tonici sollevando i lineamenti del viso ed attenuando le rughe. La circuitazione elettronica miniaturizzata e tecnicamente avanzatissima genera treni d'impulsi modulati ad onda sinusoidale specifici per i delicati muscoli del viso e segnalati da un

indicatore luminoso verde a led. Per la sua particolare forma e frequenza, questa onda induce precisi esercizi muscolari senza provocare alcuna sgradevole sensazione di dolore neppure ad intensità elevate ed a movimenti estremamente evidenti. Gli impulsi sono trasmessi alla pelle da due elettrodi coperti da morbide cupolette di spugna, molleggiati e di forma emisferica; gli elettrodi sono autoimbibenti e dispongono di un proprio serbatoio per contenere l'acqua necessaria ad un intero trattamento.

TUA VISO è facile. Dopo aver riempito i serbatoi con normale acqua è sufficiente attivare l'apparecchio e posizionarlo sulla zona del viso da trattare. Agendo sulla manopola graduata si attiva l'erogazione degli impulsi e se ne regola l'intensità.

già in dotazione e di facile sostituzione. Una spia luminosa a led di colore giallo ne segnala l'esaurimento.

TUA VISO ovunque. Le dimensioni minime, il peso ridottissimo, l'autonomia dalla rete elettrica, la plancia illuminata, ne consentono un facile utilizzo in qualunque luogo e qualsiasi circostanza, magari al buio!

TUA VISO è contenuto in una elegante astuccio insieme a spruzzetta, cupolette di ricambio ed al manualetto portatile d'istruzioni. TUA VISO è corredata da una videocassetta dimostrativa per visualizzare le possibili applicazioni e facilitare il corretto utilizzo dell'apparecchio.

TUA VISO interamente progettato e costruito in Italia



TUA VISO è pratico.

La sua forma rende anatomica l'impugnatura, mantiene la manopola di regolazione sotto continuo controllo e consente l'immediato posizionamento degli elettrodi in ogni zona del viso. Un timer digitale luminoso verde consente di impostare la durata del trattamento, ne indica il tempo residuo e ne segnala acusticamente la fine disattivando l'apparecchio. Il serbatoio a tenuta stagna di cui dispongono gli elettrodi, bastano per un intero trattamento, evita di dover ripetutamente bagnare le cupolette di spugna: per l'imbibizione è sufficiente una semplice pressione. TUA VISO è sicuro. È alimentato da una comune batteria alcalina a 9 Volt alloggiata nell'apposito vano,

TUA VISO COMPRENDE:

- TUA VISO, APPARECCHIO ELETTRONICO PER LA GINNASTICA FACIALE.
- BATTERIA ALCALINA 9 VOLT GIÀ COLLEGATA
- SPRUZZETTA
- KIT RICAMBIO CUPOLETTE DI SPUGNA
- MANUALE D'USO E D'APPLICAZIONE
- MANUALETTO PORTATILE DI RAPIDA CONSULTAZIONE
- ASTUCCIO-CONTENITORE
- CERTIFICATO DI GARANZIA 12 MESI A CORREDO: VIDEOCASSETTA DIMOSTRATIVA.

TUA VISO È SICURO, PROGETTATO E COSTRUITO CON PRIMARIA ATTENZIONE PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA, È CONFORME ALLE PIÙ SEVERE NORME INTERNAZIONALI.



LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA SENZA ALCUN PREAVVISO

www.into.it

Produzione: VUPIESSE ITALIA
Distribuzione: GRUPPO ITALIA

LOMBARDIA
PHARM AJANI Srl 02/90849155

PIEMONTE - LIGURIA
FARPI Srl 011/6490552

TRE VENEZIE
DEPOFARMA Srl 0422/490070

EMILIA ROMAGNA
VIGOFARMA Srl 051/969307

MARCHE - ABRUZZO
G. FARMA 071/2801040

TOSCANA - UMBRIA
FARMOZAN Srl 0583/492999

LAZIO
SANIFARMA Srl 06/86890541

CAMPANIA
FARMARICCI Srl 081/8331315

PUGLIA - BASILICATA
PROFAS Sas 080/5227545

SICILIA - CALABRIA
DIFARMA Srl 095/338477

SARDEGNA
AUSILIA Srl 070/9165114

I.P.

La Palestra
del sorriso

Tua
VISO

L'APPARECCHIO ELETTRONICO PER LA
GINNASTICA DEL VISO

PER MANTENERE
E RESTITUIRE
GIOVINEZZA AL VISO

VuP'Esse
BODY PLANET

R I M I N I I T A L Y

T U A I S A R E G I S T E R E D T R A D E M A R K O F V U P I E S S E I T A L I A

Per mantenere e restituire giovinezza al viso,

Tua
VISO

L'APPARECCHIO ELETTRONICO PER LA
GINNASTICA DEL VISO

Nel corso della vita il viso subisce dei cambiamenti visibili: compaiono e si accentuano le rughe, l'ovale del viso muta i suoi contorni, la pelle perde la sua normale elasticità e diviene ridondante provocando borse sotto gli occhi, afflosciamento delle guance e rilassamento del collo. **La cosmesi** può utilmente idratare e levigare la pelle, ma per sollevare il viso è necessario intervenire sulla parte strutturale, cioè sui muscoli. I muscoli del viso sono una trentina, alcuni superficialissimi e delicati, altri profondi e di discreto spessore; al contrario dei muscoli scheletrici, i muscoli della testa e del collo si inseriscono direttamente sulla pelle con almeno una estremità ed esercitano su di essa la loro azione, per questo vengono chiamati cutanei o pellicciai. Inoltre per la maggior parte servono anche all'espressione dei sentimenti, da ciò il nome di muscoli mimici. **La pelle del viso** dunque poggia ed è ancorata su un "tappeto" strutturale costituito da numerosi muscoli: la perdita di tono e di compattezza di questi è la maggior responsabile del cedimento della cute. Riuscire a mantenere loro un adeguato spessore e trofismo, specie a livello delle fibre meno usate, **significa restituire giovinezza al viso.**

È noto che gli esercizi di "ginnastica facciale", molto usati per esempio dagli attori, mantenendo in attività fasci muscolari poco utilizzati ed ipertrofizzandone altri, si oppongono a cedimenti della linea del mento, alla formazione di borse o rughe e conservano un aspetto giovane.

Gli esercizi muscolari del viso sono però spesso complessi e richiedono un paziente addestramento.


Una stimolazione elettrica può aumentare invece il tono muscolare in maniera innocua, selettiva e rapida grazie al suo effetto eccitomotore e ciò molto di più dell'esercizio fisico e del massaggio; questo effetto produce contrazioni visibili ipertrofizzando le fibre muscolari ed aumentandone lo spessore.

D'altra parte il passaggio di microcorrenti attraverso la pelle determina anche un effetto sul trofismo: la circolazione locale aumenta, **migliora l'ossigenazione, il nutrimento e la detossificazione dei tessuti**; il metabolismo ne risulta esaltato, viene stimolata la produzione di fibre elastiche e di sostanza fondamentale di sostegno.

TUA VISO è stato messo a punto tenendo conto di queste esigenze.

La sua corrente, rappresentata da un'onda sinusoidale opportunamente modulata, è in grado di indurre una contrazione muscolare sostenuta, in assenza di percezione dolorosa. La sua conformazione è stata appositamente progettata per la stimolazione dei delicati muscoli del viso e del collo. La possibilità di posizionare la parte attiva dell'apparecchio nei punti di attivazione di precisi fasci muscolari, la regolazione lineare dell'intensità dello stimolo esercitato, la programmabilità elettronica del tempo di lavoro da effettuare, permettono di ottenere risultati rapidi e selettivi.

- 1) **Platysma** (muscolo pellicciaio del collo); porta leggermente in basso la mandibola e stira in basso il labbro inferiore fino a scoprire i denti. Evita anche lo schiacciamento delle vene superficiali del collo.
- 2) **Quadrato del labbro inferiore**: tira in basso e fuori il labbro. La sporgenza in avanti del labbro è favorita anche dall'azione del muscolo incisivo, sottostante al quadrato.
- 3) **Zigomatico del labbro superiore**: tira la commessura delle labbra in alto e fuori, come nel sorriso.
- 4) **Quadrato del labbro superiore**: innalza il labbro superiore ed in parte l'ala del naso.
- 5) **Canino**: sotto al quadrato, solleva l'angolo della bocca.
- 6) **Buccinatore della guancia**: tira indietro la commessura labiale e nella masticazione comprime guancia e labbra contro l'arcata dentale.
- 7) **Orbicolare della bocca**: chiude la bocca, restringe la rima buccale e corruga le labbra.
- 8) **Muscolo mentale**: innalza e raggrinza il mento, solleva il labbro inferiore e lo incurva in basso.
- 9) **Orbicolare dell'occhio**: chiude la rima palpebrale.
- 10) **Frontale**: solleva il sopracciglio e spalanca gli occhi.
- 11) **Massetere**: è un muscolo scheletrico deputato a sollevare la mandibola, come nella masticazione.
- 12) **Sternocleidomastoideo**: è un altro muscolo scheletrico che flette la testa, la inclina dal proprio lato e fa ruotare la faccia dal lato opposto.

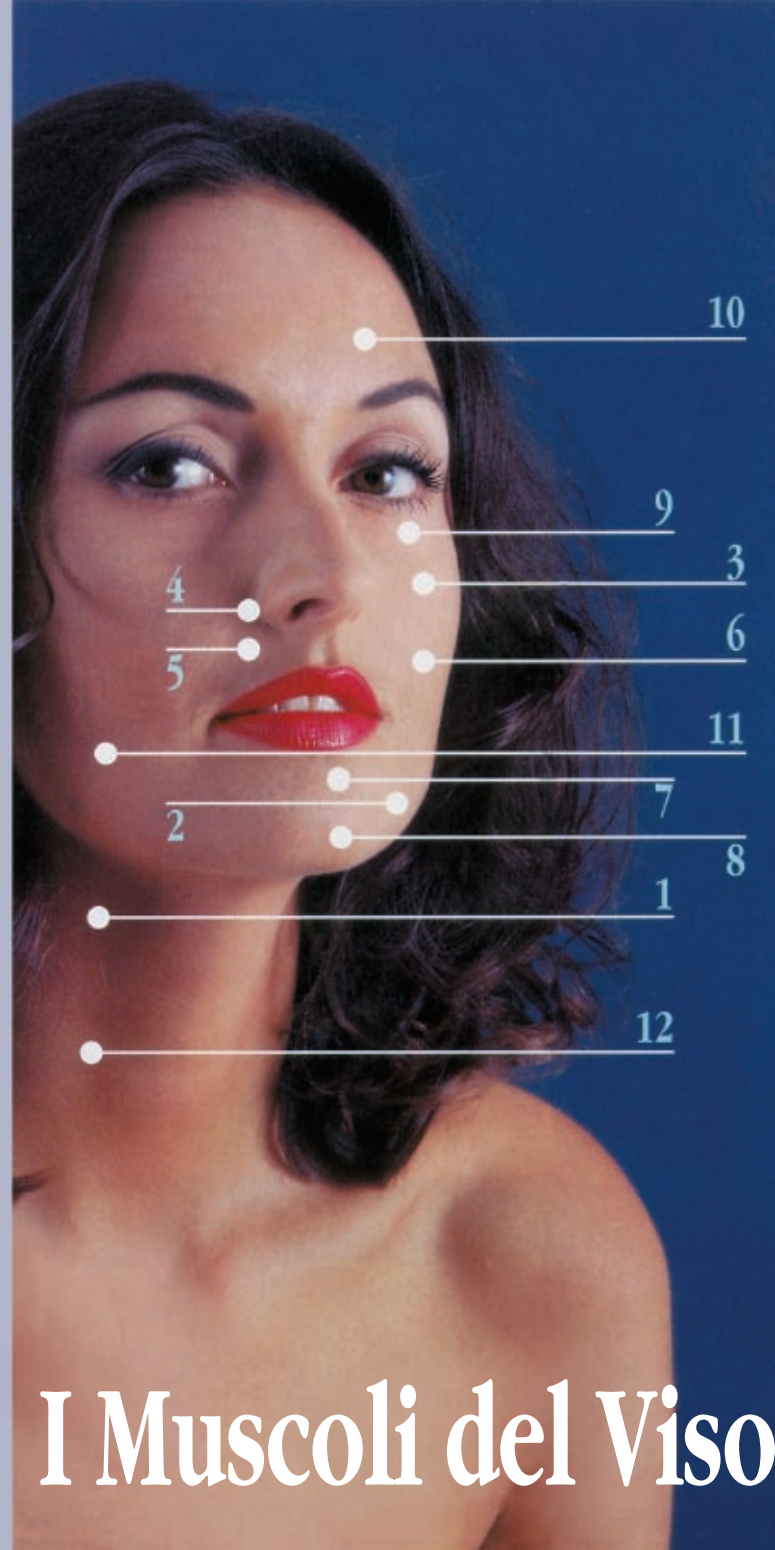


I Muscoli del Viso

L'uso di **TUA VISO** è estremamente semplice: basta appoggiare sulla pelle la sua parte attiva e regolare l'intensità fino ad ottenere un esercizio muscolare apprezzabile e gradevole. È sufficiente esercitare ogni zona anche per un solo minuto al giorno, ma i tempi di applicazione usuali sono di 2-4 minuti per parte. **Una singola seduta svolta su metà viso può fare apprezzare subito una differenza di tonicità nei confronti della metà non trattata** e sole 8-10 sedute permettono un miglioramento valutabile con esami scientificamente significativi (ecografia muscolare ed analisi computerizzata dell'immagine).

Il sistema V.P. Box

TAPPO DI CHIUSURA V.P. Box è un brevetto Vupiesse

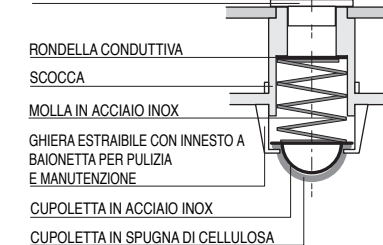

Un sofisticato sistema, studiato per un utilizzo facile e veloce di Tua Viso.

Gli elettrodi sono parti di fondamentale importanza in quanto è attraverso la loro azione che gli impulsi giungono alla pelle. **TUA VISO** dispone di speciali elettrodi brevettati **VP BOX**. Le originali cupolette ricoperte di morbida spugna e molleggiate consentono un pratico posizionamento su ogni zona del viso ed un delicato contatto con la pelle; il funzionamento ad acqua inoltre, permette un **utilizzo immediato senza l'uso di speciali gel conduttivi**. Gli elettrodi **VP BOX** sono autoimbibenti e dispongono inoltre di un proprio serbatoio per contenere l'acqua necessaria ad un intero trattamento; si evita così di dover ripetutamente bagnare le cupolette di spugna: per l'imbibizione è sufficiente una semplice pressione. Le ghiera estraibili con innesto a baionetta consentono la rapida sostituzione delle cupolette di spugna ed una agevole pulizia del serbatoio.



Solleva il sopracciglio, e 3/4 della fronte.

Solleva il sopracciglio e la palpebra superiore.

Questo esercizio determina un effetto lifting a livello della guancia.

Questo esercizio effettua una "spremitura" ed un drenaggio della borsa sotto gli occhi.

Rende tonica la parte come quando si effettua un leggero sorriso.

Aumenta il volume del labbro e si oppone alla comparsa di rughe verticali caratteristiche dell'età.

Rende turgido il labbro e si oppone alla sua atrofia.

Modella l'ovale diminuendo lo stiramento determinato dalla discesa del corpo adiposo di Bichat.

Aiuta a rassodare i delicati tessuti del collo.